



MASAŻER DO CIAŁA SHIATSU AG127B INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowe, wysokiej jakości urządzenie do masażu doskonale imitujące japońską technikę masażu kciukiem - Shiatsu!

Masażer posiada dwie główce masujące, wyposażone w aż 12 punktów masujących o anatomicznych kształtach oraz umożliwia zmianę kierunku obrotu głowic!

To wspaniała forma relaksu i terapii dla zmęczonych i napiętych mięśni ciała. Produkt doskonale odpręża i koi ból. Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z profesjonalnego gabinetu!

Cechy produktu:

- Zrelaksuj się i pozbydź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia!
- Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu!
- Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej partii Twojego ciała!
- Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w kształcie głowic i punktów masujących, które inspirowane są kształtem kciuka i japońską techniką masażu Shiatsu!
- Symetrycznie rozmieszczone dwie główce masujące, wyposażone zostały w aż 12 punktów masujących wraz z możliwością zmiany kierunku obrotu głowic.
- Niezwykła prostota obsługi z wykorzystaniem zaledwie 3 przycisków panelu kontrolnego!
- Dodatkowe akcesoria i długi przedłużacz ułatwiają korzystanie z masażera!

Specyfikacja:


- Materiał: ekoskóra (PU)
- Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Moc nominalna: 12W
- Dwa kierunki masażu z możliwością zmiany kierunku obrotu głowic
- 12 punktów masujących umieszczonych na dwóch głowicach
- Wygodny panel kontrolny z 3 przyciskami (prostota obsługi)
- Dodatkowy pokrowiec, nakładka z tkaniny oraz długi przewód zasilający!
- Wymiary: 40 cm x 20 cm x 17 cm

2. Instrukcja obsługi:

→ Podłącz urządzenie do jednego z dwóch dedykowanych zasilaczy - sieciowego 220V bądź zapalniczki samochodowej 12V jeżeli chcesz z niego skorzystać w podróży.

→ Umieść masażer na ciele w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

Sposób użytkowania

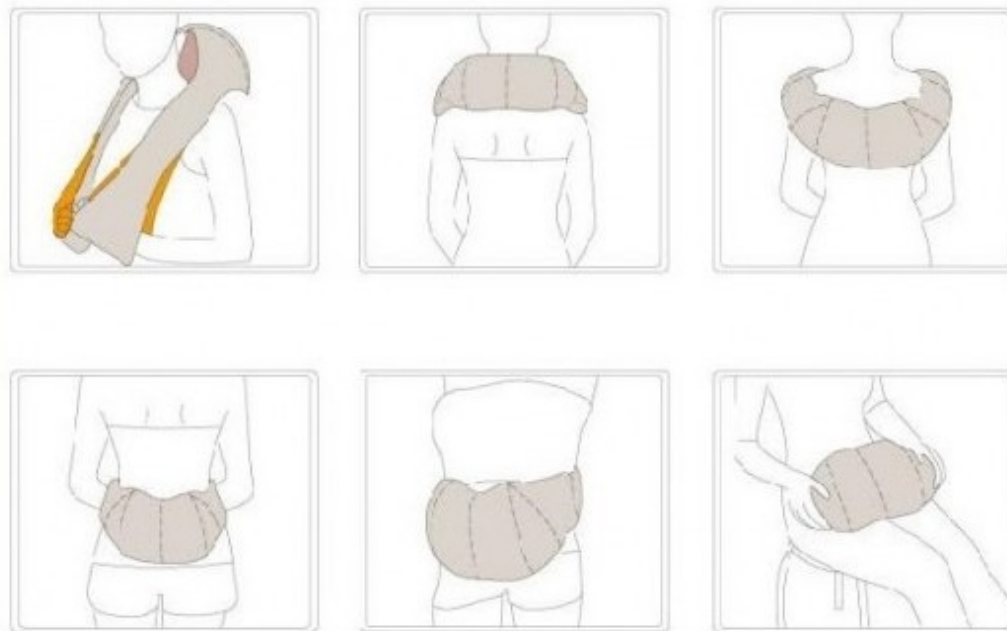

→ Uruchom masażer wciskając środkowy przycisk I/O na panelu kontrolnym. W tym momencie zaczną pracować dwie główce masujące.

→ Aby zmienić kierunek masażu wciśnij przycisk oznaczony strzałkami. Głowice przestaną się obracać i po około 1-2 sekundach zaczną się obracać w kierunku przeciwnym. Aby ponownie zmienić kierunek, wciśnij wspomniany przycisk jeszcze raz.

→ Aby uruchomić funkcję ogrzewania wciśnij przycisk oznaczony falą. Głowice masujące podświetlą się na czerwono, a urządzenie zacznie ogrzewać masowane miejsce ciała. Aby wyłączyć ogrzewanie, wciśnij ponownie przycisk oznaczony falą.

→ Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk I/O na panelu kontrolnym. Głowice masujące od razu zakończą pracę.

3. Podstawowe środki ostrożności!

→ Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.

→ Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!

→ **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**

→ **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**

→ Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

→ Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!

UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15 minut jednorazowo

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

