



## MASAŻER DO CIAŁA SHIATSU

model: AG127D

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowe, wysokiej jakości urządzenie do masażu typu Neck & Shoulder, które doskonale wykorzystuje uderzeniową technikę masażu!

To wspaniała forma relaksu i terapii dla zmęczonych i napiętych mięśni ciała. Produkt doskonale rozgrzewa, odpręża i koi ból. Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z profesjonalnego gabinetu!

#### Cechy produktu:

- Zrelaksuj się i pozbadź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia!
- Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu!
- Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej partii Twojego ciała!
- Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w specjalnej technice ugniatająco-rozcierającej spięte i obolałe mięśnie!
- Niezwykła prostota obsługi z wykorzystaniem zaledwie 4 przycisków panelu kontrolnego oraz wyświetlacza LCD!
- Tryb automatyczny sam dobiera rodzaj i intensywność masażu!
- Dodatkowe akcesoria i długi przedłużacz ułatwiają korzystanie z masażera!


#### Specyfikacja:

- Materiał: ekoskóra (PU)
- Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Moc nominalna: 60W
- Regulacja intensywności masażu
- Specjalna technika uderzeniowa masażu
- Wygodny panel kontrolny z 4 przyciskami i wyświetlaczem LCD (prostota obsługi)
- Dodatkowy pokrowiec, nakładka z tkaniny oraz długi przewód zasilający!
- Wymiary: 40 cm x 15 cm x 13,5 cm
- Łączna długość: 138 cm

## 2. Instrukcja obsługi:

- Podłącz urządzenie do jednego z dwóch dedykowanych zasilaczy - sieciowego 220V
- Umieść masażer na ciele w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

## Sposób użytkowania

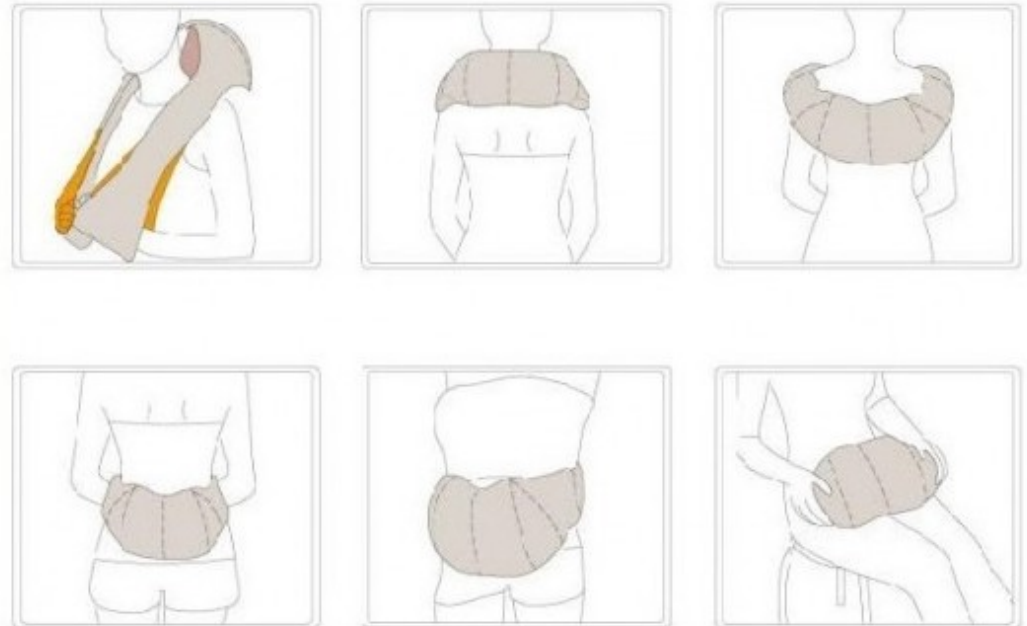

- Uruchom masażer wciskając czerwony przycisk ON/OFF na panelu kontrolnym. W tym momencie zaczną pracować dwie główce masujące.
- Masażer domyślnie uruchomi się w trybie automatycznym (AU). Aby zmienić tryb masażu z automatycznego wciskaj kolejno przycisk MODE, aż do wyboru pożądanego trybu (możesz wybierać spośród 99 rodzajów masażu)
- Masażer posiada 20-stopniową skalę siły masażu. Aby zwiększyć siłę masażu – kolejno wciskaj przycisk HIGH. Aby zmniejszyć siłę masażu – kolejno wciskaj przycisk LOW
- Aby wstrzymać masaż wciśnij przycisk ON/OFF podczas pracy masażera. Na wyświetlaczu pojawi się pulsujący napis „OF” oznaczający gotowość do pracy.
- Aby wyłączyć urządzenie. Wciśnij przycisk ON/OFF aby wstrzymać masaż i odłącz masażer od zasilania sieciowego!

### 3. Podstawowe środki ostrożności!

→ Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.

→ Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!

→ **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**

→ **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**

→ Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

→ Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!

**UWAGA:** Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15 minut jednorazowo

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.



#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.