



PISTOLET DO MASAŻU 4 GŁOWICE AG127F INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowy, bezprzewodowy pistolet do masażu z 4 wymiennymi głowicami masującymi dedykowanymi dla różnych partii ciała.

Dzięki temu urządzeniu, wreszcie będziesz mógł zrelaksować i wzmocnić zmęczone mięśnie pleców i karku ale nie tylko! Masażer świetnie nada się do zastosowania także w innych partiach ciała. Sprawisz, że zwiotczałe i sztywne mięśnie staną się znowu jędrne, a przy okazji rozluźnisz szyję i plecy po ciężkim dniu w pracy.

Masażer posiada aż 4 różne głowice masujące (płaską, okrągłą, widełki oraz pocisk), które bardzo łatwo wymienić. Dzięki wyposażeniu urządzenia we wbudowany akumulator możesz korzystać z masażera nawet w trakcie podróży.

To wspaniała forma relaksu dla zmęczonych i napiętych mięśni ciała. Produkt doskonale odpręża i relaksuje. Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z profesjonalnego gabinetu.

Cechy produktu:

- Zrelaksuj się i pozbadź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia.
- Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu.
- Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia każdej partii Twojego ciała.
- Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w kształcie głowic (płaska, okrągła, widełki oraz pocisk).
- Wymienne głowice masujące (4) zapewniają różne typy masażu dostosowane do danej partii ciała.
- Niezwykła prostota obsługi (łatwa wymiana głowic).
- Cichy i energooszczędny silnik umożliwia masaż w każdych warunkach.
- Nawet 3h pracy na jednym ładowaniu akumulatora.


Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: akumulator Li-Ion 2000 mAh
- Napięcie: 8,4V DC
- Czas ładowania: około 60 min
- Czas pracy: 2-3h
- Moc nominalna: 24W
- Regulowana siła masażu (6 poziomów).
- 4 wymienne głowice masujące (widełki, pocisk, płaska, okrągła).
- Wygodny panel kontrolny.
- Długość: 22,2 cm
- Szerokość: 6,5 cm
- Wysokość: 23 cm
- Długość przewodu: 100 cm

2. Instrukcja obsługi:

→ Umieść jedną z 4 końcówek masujących w głowicy masażera (widełki, pocisk, płaska, okrągła), zależnie od pożądanego sposobu masażu.

→ Ustaw masażer na ciele w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

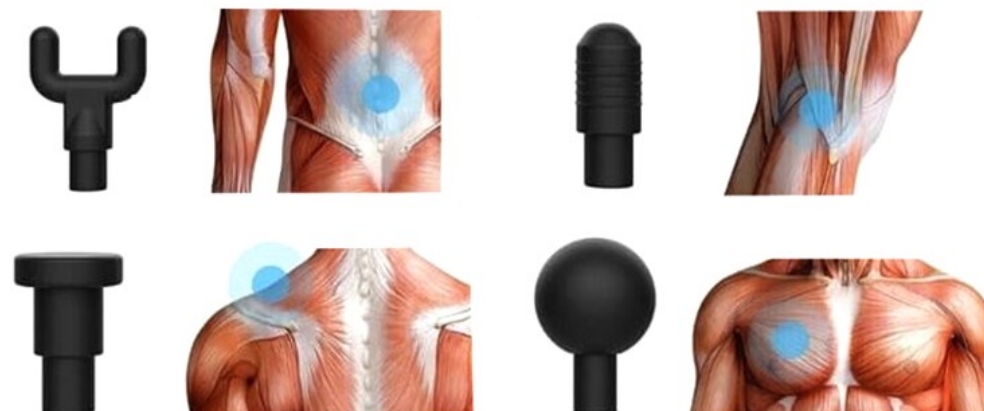

→ Uruchom masażer wciskając środkowy przycisk I/O na panelu kontrolnym. W tym momencie zacznie pracować głowica masująca. Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to około 15 minut.

UWAGA: Jeżeli akumulator urządzenia jest rozładowany podłącz urządzenie do dedykowanego zasilacza sieciowego 220V, następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej w celu jego naładowania. Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia podczas jego ładowania (grozi to spadkiem pojemności akumulatora bądź jego uszkodzeniem!).

→ Aby zmienić prędkość masażu (w skali 6 stopniowej), kolejno wciskaj przycisk na środku panelu kontrolnego.

→ Ilość zapalonych diod oznacza aktualną siłę masażu (od 1 do 6).

→ Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk I/O na panelu kontrolnym. Głowice masujące od razu zakończą pracę.

→ Gniazdo ładowania znajduje się pod przyciskiem na panelu kontrolnym.

3. Podstawowe środki ostrożności!

- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
- **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**
- **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**
- Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.
- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po zakończonej pracy!

UWAGA: Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 10-15 minut jednorazowo

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

