

URZĄDZENIE DO PEEELINGU KAWITACYJNEGO, SONOFOREZY I LIFTINGU TWARZY

MODEL: AG207



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Urządzenie do przeprowadzania zabiegu peelingu kawitacyjnego, liftingu oraz sonoforezy!

Peeling kawitacyjny to zabieg wykonywany za pomocą ultradźwięków. Stosowany jest głównie do bezdotykowego i bezbolesnego oczyszczania twarzy. Fale ultradźwiękowe, w obecności wody rozprzodzonej na powierzchni skóry tworzą mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem. Pod wpływem drgań ultradźwiękowych, pęcherzyki te pękają powodując jednocześnie rozbijanie martwych komórek warstwy rogowej skóry. SONOFOREZA - Ultradźwięki wykorzystywane są do wprowadzania kosmetyków w głąb skóry w celu ich skuteczniejszego działania. Urządzenie posiada ponadto funkcję liftingu.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Urządzenie jest bardzo proste i wygodne w użyciu.
- Nowoczesny i atrakcyjny design.
- Łatwe sterowanie za pomocą trzech dedykowanych przycisków
- Możliwość ustawienia czasu zabiegu (w minutach), mocy oraz trybu pracy.
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach bezczynności.
- Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu!

Korzyści:

- Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych.
- Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i elastyczną.
- Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych.
- Nadaje skórze natychmiastowy blask.
- Stymuluje krążenie krwi.
- Poprawia wymianę jonową, wzmacnia produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego.

Korzyści ze stosowania urządzenia:

- Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych.
- Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i elastyczną.
- Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych.
- Nadaje skórze natychmiastowy blask.
- Stymuluje krążenie krwi.
- Poprawia wymianę jonową, wzmacnia produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.

Specyfikacja:


- Moc: 7W
- Źródło zasilania: Wbudowany akumulator Li-Po 3.7 V o pojemności 250 mAh
- Czas ładowania: poniżej 60 minut
- Sposób ładowania: dołączony zasilacz o napięciu 5V (USB) i mocy 300mA
- Dopuszczalna temperatura pracy: od -20° do 60° Celsjusza
- Poziom wilgotności powietrza: od 20 do 90%
- Zakres ciśnienia atmosferycznego (kawitacja): od 700 do 1060 hPa
- Waga: 97 g
- Wymiary: 16,8 cm x 4,5 cm x 1,7 cm

2. Tryby pracy (CLEANING, ABSORB, REPAIR)


CLEANING - peeling kawitacyjny:

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, skóra zostaje również zdezynfekowana.

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk POWER aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk POWER, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku CLEANING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

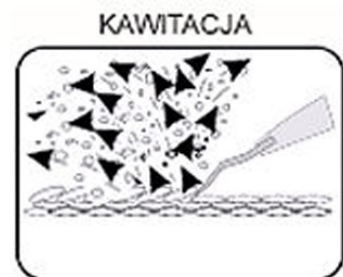

Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do przodu (zgodnie z przebiegiem mięśni). Szpatułkę trzymać pod kątem 45 stopni. W czasie zabiegu systematycznie zwilżać skórę. W trakcie zabiegu skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

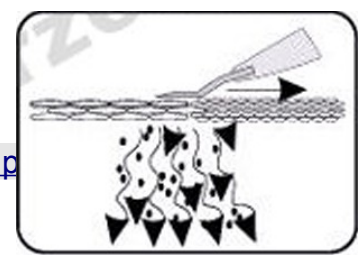

Importer: APTEL Adam Pawlak sp. j. <http://www.hurtownia.aptel.pl>

ASBORB - sonoforeza – wtlaczanie:

Funkcja ta umożliwia wtlaczanie kosmetyków w glab skory przez co znacznie wziesza ich dzialanie. Stosowac kosmetyki aktywne, nawilzajace, tonizujace w postaci np. plynu lub zelu.


Nie stosowac kosmetykow w postaci kremow oraz kosmetykow tlustych!!!

1. Aby uruchomic urzadzenie, nalezy przez kilka sekund przytrzymac przycisk POWER az do zaswiecenia sie zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urzadzenia (co zostanie zasygnalizowane podswietleniem przycisku POWER), nalezy kolejno, krótko wcisnac przycisk POWER, az do przejscia urzadzenia do zadanego trybu (w tym wypadku ABSORB). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie sie diody pod napisem.
3. Urzadzenie zacznie dzialac automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtlaczanie preparatow szpatula na ulozonej na plasko (efekt pulsacyjny). Dotknac glowica skory i przesuwać ją do tyłu w pozycji na plasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtlaczanie preparatow kosmetycznych bezposrednio w glab skory.

REPAIR – lifting / oczyszczanie:

Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony ponizej sposob.

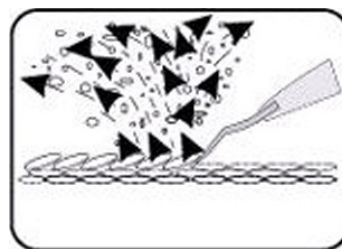

1. Aby uruchomic urzadzenie, nalezy przez kilka sekund przytrzymac przycisk POWER az do zaswiecenia sie zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urzadzenia (co zostanie zasygnalizowane podswietleniem przycisku POWER), nalezy kolejno, krótko wcisnac przycisk POWER, az do przejscia urzadzenia do zadanego trybu (w tym wypadku REPAIR). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie sie diody pod napisem.
3. Urzadzenie zacznie dzialac automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Zwilzyc skore solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa czesc szpatuly musi byc prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi byc w trakcie zabiegu zwilzana (nie stosowac na suchą skóre!). Ruch łopatki od srodka do zewnatrz powinien odbywac sie zgodnie z ulozeniem miesni, powoli i ruchem płynnym, nie zatrzymujac sie w jednym miejscu.

ABY WYLACZYĆ URZADZENIE PONOWNIE, DŁUGO PRZYTRZYMAJ PRZYCISK **POWER**

3. Sposób ładowania:

1. Podlacz urzadzenie dołączonym kablem USB do dowolnego portu USB komputera, pamietajac o tym aby komputer byl aktualnie wlaczony i dostarczal napiecie 5V do portu!
2. Podlacz kabel USB do dowolnego adaptera / zasilacza 5V, np. do ładowarki telefonu komorkowego. Nastepnie podlacz zasilacz do kontaktu (sieci elektrycznej 220-240V)

4. Funkcje (podsumowanie):

Urzadzenie znacznie ulatwia utrzymanie skory twarzy w doskonałej kondycji! Wykorzystuje ono do tego technologie kawitacji – zjawiska fizycznego ktore polega na gwałtownej przemianie czasteczek z fazy cieklej w faze gazową, w wyniku zmniejszenia cisnienia atmosferycznego. Pozwala to na dokonywanie skutecznych zabiegow pielagnujacych, regenerujacych i oszczyszczajacych twarz, nie powodujac jednoczesnie uszkodzen zdrowych warstw skory. Nasze urzadzenie wyposazone jest w funkcje peelingu, sonoforezy oraz liftingu (oczyszczania), ktore zostaly opisane w powyzzszych czesciach instrukcji obslugi! Obsluga urzadzenia jest niezwykle prosta i wygodna dzieki mozliwosci wyboru funkcji jednym przyciskiem! Radzimy jednak zapoznac sie z niniejsza instrukcja obslugi przez osoby niewprawione w uzytkowaniu podobnych urzadzen, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom skory i zapewnic prawidlowy przebieg zabiegu!

5. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ, ŻE POSTĘPOWANIE NIEZGODNIE Z ZALECENIA NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Aparat jest zasilany napięciem z wbudowanego akumulatora i ładowany niskim napięciem 5V z portu USB bądź dedykowanego zasilacza. Wszelkie uszkodzenia obudowy oraz samodzielnie modyfikacje urządzenia zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz mogą powodować poważne uszkodzenie sprzętu czy też powstanie pożaru!
- UWAGA: NIE STOSOWAĆ NA OCZY ORAZ BEZPOŚREDNIO W ICH OKOLICY!
- Używaj ładowarki / zasilacza o napięciu 5V i wydajności prądowej minimum 300mA.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je i pozostaw w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepowołanych.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 45 minut w jednej sesji!
- W przypadku gdy urządzenie jest dłuższy czas nieużywane, istnieje ryzyko rozładowania się akumulatora. Należy ponownie naładować akumulator zwracając uwagę na używany zasilacz i jego napięcie (5V)!

Używanie ultradźwięków jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach:

Wysokie ciśnienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca, zylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna gruźlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.