

# URZĄDZENIE DO PEEELINGU KAWITACYJNEGO I SONOFOREZY

MODEL: AG207C



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia do peelingu.  
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

### 1. Informacje podstawowe

#### **Urządzenie do przeprowadzania zabiegu peelingu kawitacyjnego, liftingu oraz sonoforezy!**

Peeling kawitacyjny to zabieg kosmetyczny wykonywany za pomocą ultradźwięków i wody.

Stosowany jest głównie do bezdotykowego i bezbolesnego oczyszczania twarzy z porów i innych zanieczyszczeń, które usuwane są za pomocą generowanych przez urządzenie fal ultradźwiękowych.

Fale ultradźwiękowe w obecności wody rozprzodanej na powierzchni skóry twarzy tworzą mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem.

Pod wpływem drgań fal ultradźwiękowych, pęcherzyki te pękają powodując jednocześnie rozbijanie martwych komórek warstwy rogowej skóry.

Wystarczy przesunąć szpatułką urządzenia po wilgotnej powierzchni skóry twarzy, aby ultradźwięki oczyściły skórę!

Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla alergików! Do zabiegów nie są wymagane żadne środki chemiczne poza czystą wodą!

**SONOFOREZA - Ultradźwięki wykorzystywane są do wprowadzania kosmetyków w głąb skóry w celu ich skuteczniejszego działania!**

#### **Cechy produktu:**

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Urządzenie jest bardzo proste i wygodne w użyciu.
- Nowoczesny i atrakcyjny design.
- Łatwe sterowanie za pomocą przycisków na froncie urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie zasilania.
- Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu!

## Korzyści:

- Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych.
- Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i elastyczną.
- Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych.
- Nadaje skórze natychmiastowy blask.
- Stymuluje krążenie krwi.
- Poprawia wymianę jonową, wzmacnia produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.

## Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 5V (ładowanie dołączonym kablem microUSB)
- Moc znamionowa: 3W
- Częstotliwość fal ultradźwiękowych: 28 KHz (28000 impulsów na minutę)
- Tryby pracy (2): ciągły i pulsacyjny
- Wymiary: 19,5 cm x 4,7 cm x 1,7 cm
- Waga: 112 g

## 2. Uruchomienie i obsługa urządzenia

1. Uruchomić urządzenie wciskając przycisk I/O. Urządzenie automatycznie uruchomi podstawowy tryb pracy (peeling kawitacyjny).
2. Tryb pracy urządzenia zmienia się trzykrotnym wciśnięciem przycisku C/N/S (z każdym kliknięciem zwiększając natężenie konkretnego zabiegu od 1 do 3 stopnia).
3. Częstotliwość i kierunek fal ultradźwiękowych zmienia się trzykrotnym wciśnięciem przycisku SONIC (z każdym kliknięciem zwiększając siłę fali ultradźwiękowej).
4. Po skończonym zabiegu należy wyłączyć urządzenie przyciskiem I/O
5. Zabieg może trwać maksymalnie 10 min. po tym czasie urządzenie przerwie pracę.

## 3. Tryby pracy (CLEAN, NUTRI, EMS)

### CLEAN – PEELING KAWITACYJNY:

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, skóra zostaje również zdezynfekowana.


1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER (I/O)
2. Po uruchomieniu urządzenia, należy kolejno wciskać przycisk C/N/S aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku CLEAN). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem oraz jego podświetlenie.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.
5. Siłę zabiegu regulujemy dwoma kolejnymi kliknięciami przycisku C/N/S (trzecie kliknięcie spowoduje zmianę trybu pracy na kolejny).
6. Podczas każdego z trybów pracy istnieje możliwość wyboru częstotliwości i kierunku fali ultradźwiękowej (kolejnymi wciśnięciami przycisku SONIC).



Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do przodu (zgodnie z przebiegiem mięśni). Szpatułkę trzymać pod kątem 45 stopni. W czasie zabiegu systematycznie zwilżać skórę. W trakcie zabiegu skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

## **NUTRI – LIFTING / OCZYSZCZANIE:**

Zabieg ten umożliwi oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony poniżej sposób.

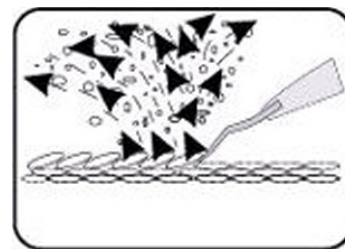


1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER (I/O)
2. Po uruchomieniu urządzenia, należy kolejno wciskać przycisk C/N/S aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku NUTRI). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem oraz jego podświetlenie.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.
5. Siłę zabiegu regulujemy dwoma kolejnymi kliknięciami przycisku C/N/S (trzecie kliknięcie spowoduje zmianę trybu pracy na kolejny).
6. Podczas każdego z trybów pracy istnieje możliwość wyboru częstotliwości i kierunku fali ultradźwiękowej (kolejnymi wciśnięciami przycisku SONIC).

Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatkii od środka do zewnątrz powinien odbywać się zgodnie z ułożeniem mięśni, powoli i ruchem płynnym, nie zatrzymując się w jednym miejscu.

**UWAGA: NIE STOSOWAĆ NA OCZY ORAZ BEZPOŚREDNIO W ICH OKOLICY!**

## **EMS – SONOFOREZA / WTŁACZANIE:**

Funkcja ta umożliwi wtłaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu.

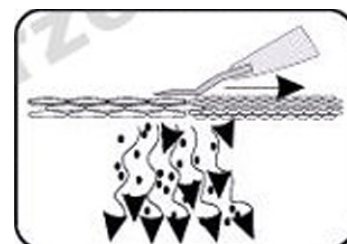

Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych!!!

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER (I/O)
2. Po uruchomieniu urządzenia, należy kolejno wciskać przycisk C/N/S aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku EMS). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem oraz jego podświetlenie.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.
4. Siłę zabiegu regulujemy dwoma kolejnymi kliknięciami przycisku C/N/S (trzecie kliknięcie spowoduje zmianę trybu pracy na kolejny).
5. Podczas każdego z trybów pracy istnieje możliwość wyboru częstotliwości i kierunku fali ultradźwiękowej (kolejnymi wciśnięciami przycisku SONIC).

Wtłaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtłaczanie preparatów kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry.

## 4. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

### UWAGA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
- Używaj tylko dołączonego zasilacza o napięciu 7V i natężeniu 0.8A.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 10minut w jednej sesji.

### Używanie ultradźwięków jest absolutnie niezalecane w następujących przypadkach:

wysokie ciśnienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca, żylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna gruźlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

