

MASAŻER ULTRADŹWIĘKOWY 2W1

MODEL:AG492



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia do masażu ultradźwiękowego i fototerapii. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe

Masażer ultradźwiękowy z funkcją światłoterapii 2w1 - jeżeli chcesz ujędrnić skórę, poprawić jej koloryt oraz skutecznie walczyć ze zmarszczkami to urządzenie jest przeznaczone dla Ciebie.

Cechy produktu:

- Masażer ultradźwiękowy z funkcją fototerapii wspomaga walkę z niedoskonałościami skóry- między innymi zmarszczki, blizny, przebarwienia.
- Wyrównuje koloryt skóry, poprawia krążenie, wspomaga walkę z trądzikiem, wygładza blizny i zmarszczki.
- Pobudza metabolizm komórek, dzięki temu są lepiej dotlenione, pobudza syntezę nowych włókien kolagenowych. Pobudza naturalny mechanizm obronny organizmu.
- Wspomaga tworzenie się nowych kapilar, dzięki temu skóra jest lepiej ukrwiona-odżywniona. Wspiera funkcjonowanie układu limfatycznego.
- Włacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż klasyczne wmasowanie.
- Posiada ergonomiczny kształt, dzięki czemu wygodnie się z nim pracuje.
- Wyposażony w czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania.
- **ULTRADŹWIĘKI** - pozwalają na relaksujący i korzystny sposób włączania w głąb skóry substancji aktywnych zawartych w kosmetykach. Ciepło wytworzone podczas zabiegu głęboko penetruje tkanki, odpręża skórę i mięśnie a głęboki mikro masaż poprawia przepływ krwi i limfy oraz metabolizm i regenerację komórek. Terapia ultradźwiękami jest nieinwazyjna, bezpieczna, łagodna, zwiększa skuteczność i jakość zabiegów oraz potęguje działanie substancji aktywnych zawartych w

kosmetykach.

- **FOTOTERAPIA** -1. **Światło czerwone (R)** : Zwiększa aktywność komórkową na poziomie skóry. Stymulacja światłem zwiększa przepływ krwi, pomaga dostarczyć substancje odżywcze i czynniki wzrostu do leczonych obszarów. Światło czerwone pobudza produkcję fibroblastów i kolagenu w skórze ze zmarszczkami. Otwiera kanały limfatyczne dzięki czemu następuje lepszy drenaż, co ułatwia usuwanie substancji toksycznych i powoduje, że skóra wygląda zdrowiej Wskazania: spłykanie zmarszczek, likwidowanie ziemistego koloru skóry, walka z trądzikiem, poprawa przemiany materii, poprawa stopnia utlenienia skóry.
- 2. **Światło zielone (G)**: Łączy w sobie efekty działania kolorów czerwonego i niebieskiego, dodatkowo działanie relaksacyjne, zwiększa natlenienie poprzez lepszą cyrkulację krwi. Wskazania: walka z trądzikiem, zaskórnikami, rozjaśnia przebarwienia po opalaniu.
- 3. **Światło niebieskie (B)** : Ma działanie uspokajające, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne. Wskazania: trądzik pospolity, trądzik różowaty, działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Specyfikacja:

- 2 tryby pracy masażu ultradźwiękowego + moc słaba/silna
- Możliwość wyboru 1 koloru światła i łączenie kolorów RGB
- Możliwość wyboru trybu fototerapii: światło ciągle + 4 tryby migania
- Możliwość jednoczesnego stosowania masażu ultradźwiękowego i fototerapii
- Moc wyjściowa: 10W
- Zasilanie: DC – 24V 0,5A
- Częstotliwość impulsu: 200KHz - 1MHz
- Długość kabla: 150cm
- Wymiary: 160 x 50 x 58mm


2. Tryby pracy

Masaż ultradźwiękowy

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów.

Ponadto funkcja ta umożliwi włączanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci płynu lub żelu. Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.

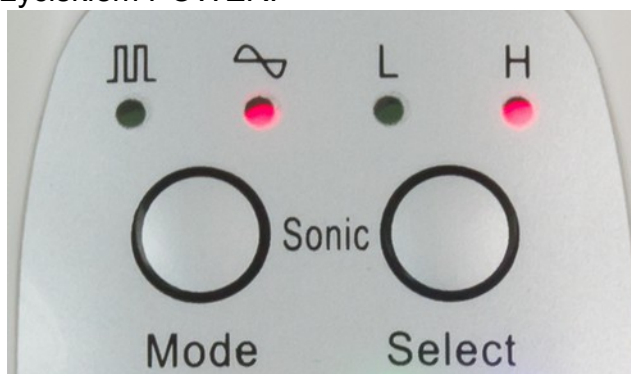

2. Wybrać tryb pracy przyciskiem Mode (masaż ciągły/pulsacyjny). Aby masować skórę

wybrać tryb ciągły, aby włączać kosmetyki wybrać tryb pulsacyjny.

3. Wybrać intensywność (L-mała, H – duża) przyciskiem Select

4. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna) lub wybrany kosmetyk.

5. Urządzenie zaczyna działać automatycznie. Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją po ciele ruchami okrężnymi.

Skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach pracy.

Tryb fototerapii.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.



2. Wybrać kolor światła przyciskiem Select.

3. Wybrać tryb świecenia (ciągły/pulsacyjny) przyciskiem Mode.

4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie. Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją po ciele ruchami okrężnymi.

5. Tryb fototerapii można stosować jednocześnie z trybem masażu ultradźwiękowego.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci 230V. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
- Używaj zasilacza o napięciu 24V i wydajności prądowej minimum 0,5A.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 30 minut w jednej sesji.

Używanie ultradźwięków jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach: wysokie ciśnienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca, żylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna gruźlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.