

URZĄDZENIE DO PEEELINGU KAWITACYJNEGO, SONOFOREZY I LIFTINGU TWARZY

MODEL: AG207E



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Urządzenie do przeprowadzania zabiegu peelingu kawitacyjnego, liftingu oraz sonoforezy!
Peeling kawitacyjny to zabieg kosmetyczny wykonywany za pomocą ultradźwięków i wody.

Stosowany jest głównie do bezdotykowego i bezbolesnego oczyszczania twarzy z porów i innych zanieczyszczeń, które usuwane są za pomocą generowanych przez urządzenie fal ultradźwiękowych.

Fale ultradźwiękowe w obecności wody rozprawdanej na powierzchni skóry twarzy tworzą mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem.

Pod wpływem drgań fal ultradźwiękowych, pęcherzyki te pękają powodując jednocześnie rozbijanie martwych komórek warstwy rogowej skóry.

Wystarczy przesunąć szpatułką urządzenia po wilgotnej powierzchni skóry twarzy, aby ultradźwięki oczyściły skórę!

Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla alergików! Do zabiegów nie są wymagane żadne środki chemiczne poza czystą wodą!

SONOFOREZA - Ultradźwięki wykorzystywane są do wprowadzania kosmetyków w głąb skóry w celu ich skuteczniejszego działania!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Urządzenie jest bardzo proste i wygodne w użyciu.
- Nowoczesny i atrakcyjny design.
- Łatwe sterowanie za pomocą podświetlanych przycisków na froncie urządzenia.
- **3 tryby pracy: usuwanie naskórka (cleansing), nawilżanie i ujędrnianie skóry (moisturizing), usuwanie zmarszczek (lifting).**
- Możliwość ustawienia czasu zabiegu (w minutach), mocy oraz trybu pracy.
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach bezczynności.
- Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu!

Korzyści zabiegów:

- Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych.
- Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i elastyczną.
- Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych.
- Nadaje skórze natychmiastowy blask.
- Stymuluje krążenie krwi.
- Poprawia wymianę jonową, wzmacnia produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego.

Specyfikacja:


- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Moc znamionowa: 3W
- Zasilanie: bateryjne
- Wygodne ładowanie (dedykowany kabel USB)
- 3 różne tryby pracy
- Częstotliwość fal ultradźwiękowych: 2,2 miliona na 1 sekundę
- Wbudowany akumulator
- Wymiary: 15,5 cm x 4,5 cm
- **Kolor: biały**
- Waga urządzenia: ok. 600 g

2. Tryby pracy (CLEANING, MOISTURIZING, REPAIR)

CLEANING - peeling kawitacyjny:

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, skóra zostaje również zdezynfekowana.


1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno wcisnąć przycisk POWER, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku CLEANING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

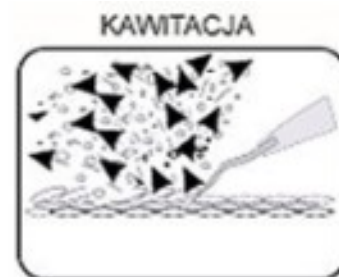

Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją do przodu (zgodnie z przebiegiem mięśni). Szpatułkę trzymać pod kątem 45 stopni. W czasie zabiegu systematycznie zwilżać skórę. W trakcie zabiegu skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

MOISTURIZING - sonoforeza – wtlaczanie:

Funkcja ta umożliwia wtlaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu.

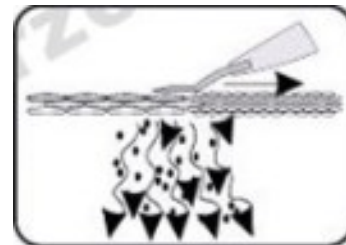


Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych!!!

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno wcisnąć przycisk POWER, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku MOISTURIZING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtlaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtlaczanie preparatów kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry.

LIFTING – oczyszczanie:

Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony poniżej sposób.

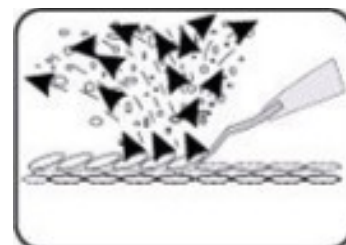

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno wcisnąć przycisk POWER, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku LIFTING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatki od środka do zewnątrz powinien odbywać się zgodnie z ułożeniem mięśni, powoli i ruchem płynnym, nie zatrzymując się w jednym miejscu.

UWAGA: NIE STOSOWAĆ NA OCZY ORAZ BEZPOŚREDNIO W ICH OKOLICY!

3. Sposób ładowania:

1. Podłącz urządzenie dołączonym kablem USB do dowolnego portu USB komputera, pamiętając o tym aby komputer był aktualnie włączony i dostarczał napięcie 5V do portu!
2. Podłącz kabel USB do dowolnego adaptera / zasilacza 5V, np. do ładowarki telefonu komórkowego. Następnie podłącz zasilacz do kontaktu (sieci elektrycznej 220-240V)

4. Funkcje (podsumowanie):

Urządzenie znacznie ułatwia utrzymanie skóry twarzy w doskonałej kondycji! Wykorzystuje ono do tego technologię kawitacji – zjawiska fizycznego które polega na gwałtownej przemianie cząsteczek z fazy ciekłej w fazę gazową, w wyniku zmniejszenia ciśnienia atmosferycznego. Pozwala to na dokonywanie skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych, regenerujących i oszczyszczających twarz, nie powodując jednocześnie uszkodzeń zdrowych warstw skóry. Nasze urządzenie wyposażone jest w funkcję peelingu, sonoforezy oraz liftingu (ocyszczania), które zostały opisane w powyższych częściach instrukcji obsługi! Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i wygodna dzięki możliwości wyboru funkcji jednym przyciskiem! Radzimy jednak zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przez osoby niewprawione w użytkowaniu podobnych urządzeń, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom skóry i zapewnić prawidłowy przebieg zabiegu!

5. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ, ŻE POSTĘPOWANIE NIEZGODNIE Z ZALECENIA NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Aparat jest zasilany napięciem z wbudowanego akumulatora i ładowany niskim napięciem 5V z portu USB bądź dedykowanego zasilacza. Wszelkie uszkodzenia obudowy oraz samodzielnie modyfikacje urządzenia zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz mogą powodować poważne uszkodzenie sprzętu czy też powstanie pożaru!
- Używaj ładowarki / zasilacza o napięciu 5V i wydajności prądowej minimum 300mA.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je i pozostaw w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepowołanych.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 45 minut w jednej sesji!
- W przypadku gdy urządzenie jest dłuższy czas nieużywane, istnieje ryzyko rozładowania się akumulatora. Należy ponownie naładować akumulator zwracając uwagę na używany zasilacz i jego napięcie (5V)!

Używanie ultradźwięków jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach:

Wysokie ciśnienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca, zylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna gruźlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

